


Socorex® *ultra* 1810

Mikro- bis Medium-Injektionen | ausgezeichnete Leistungsdaten | langlebige Qualität

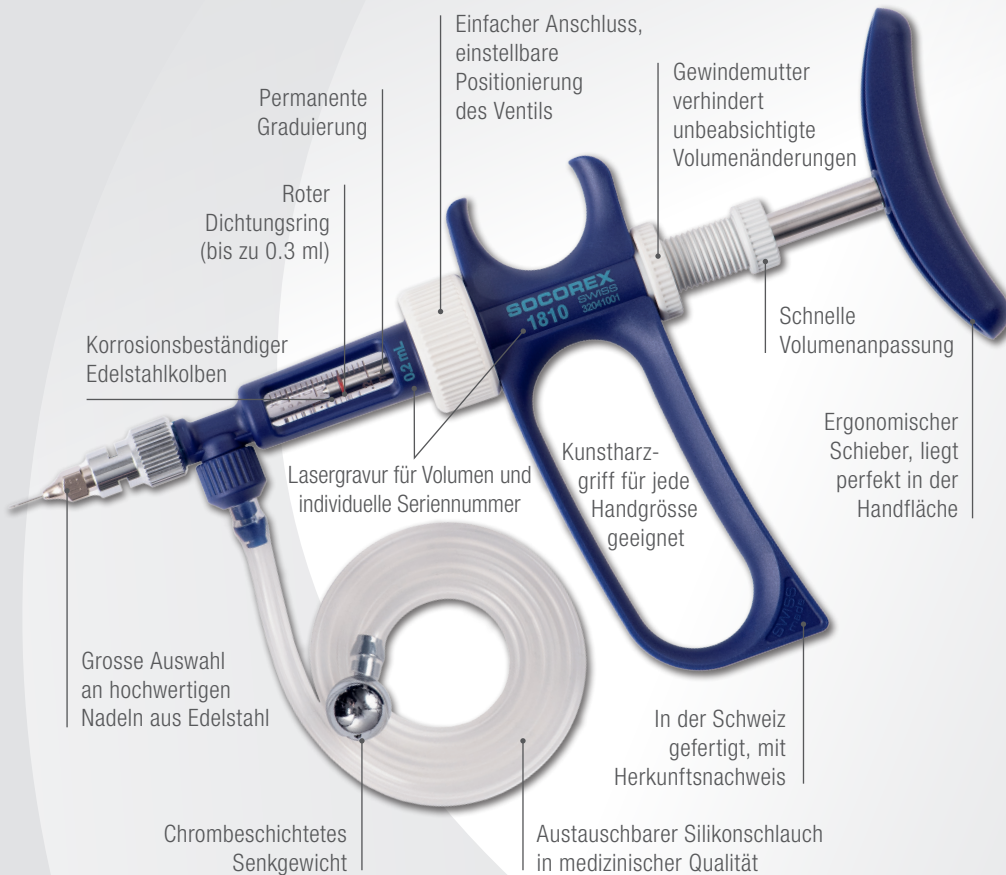

Leichtere und reibungslose Injektionen

Die Socorex® *ultra* 1810 Tierinjektions-Spritzen bieten durch die hochpräzise Dosierung im Volumenbereich von 0.02 bis 2 ml, neue Möglichkeiten in der Tierimpfung.

Das Sortiment an wiederverwendbaren, robusten und leichten Spritzen zeichnet sich durch besten Anwenderkomfort und geschmeidige Kolbenbetätigung aus, was einer Ermüdung der Hand entgegen wirkt.

Eigenschaften und Vorteile

- Robust, langlebig und hervorragende Qualität
- Leicht im Gewicht und geschmeidig in der Handhabung
- Hohe messtechnische Leistungsdaten
- Geeignet für alle Impfstoffe und Medikamente
- Einfache Demontage und Wartung
- Vollständig zusammengebaut autoklavierbar

Hochwertige Materialauswahl

Sorgfältig ausgewählte Materialien ermöglichen hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



Mehr
Produktdetails


Auswahl der am besten geeigneten Spritze

Wählen Sie die ideale Volumen-Hub-Kombination für bestmöglichen Anwenderkomfort und optimales Leistungsniveau.

Spritzenkapazität ml	Kolbenhub und Leistungsfähigkeit (CV%)								
	Min. Vol.			Zw. Vol.			Max. Vol.		
	Volumen ml	Hub mm	V%	Volumen ml	Hub mm	V%	Volumen ml	Hub mm	V%
0.1	0.02	4.0	<1.8%	0.05	9.5	<1.2%	0.1	19.5	<0.5%
0.2	0.05	6.0	<1.6%	0.1	11.5	<1.0%	0.2	23.0	<0.5%
0.3	0.05	3.5	<1.4%	0.15	10.5	<0.9%	0.3	21	<0.45%
0.5	0.1	4.5	<1.2%	0.25	11.5	<0.8%	0.5	22.5	<0.4%
1.0	0.1	2.0	<0.7%	0.5	9.5	<0.6%	1.0	19	<0.4%
2.0	0.3	3.0	<0.6%	1.0	10.5	<0.5%	2.0	21	<0.4%

Leistungsdaten können je nach Flüssigkeitstyp, Viskosität und Nadelgrösse variieren.

Beispiele für Praxisanwendungen

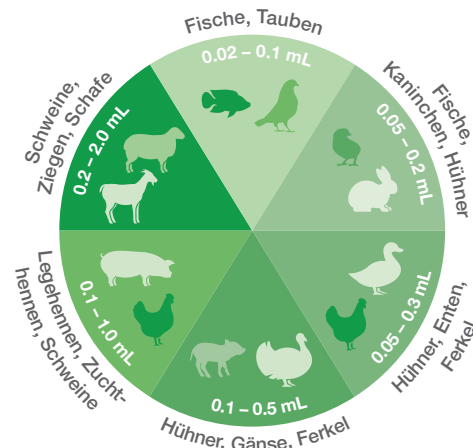

Bestellinformationen – Instrumente und wesentliche Bestandteile

Spritze wird gebrauchsfertig geliefert. Im Standard-Lieferumfang enthalten sind: 1 m Saugschlauch, Senkgewicht, Saugnadel, Entlüftungskanüle, Ersatzbeutel mit Ventilkartuschen, Zylinderdichtungsring, Kolbendichtungsring und Führung (nur bis 0.3 ml), Bedienungsanleitung.

Spritzen <i>ultra</i> 1810				Unverzichtbare Ersatzteile, Kat. Nr.			
Kapazität ml	Volumenbereich ml	Teilung ml	Kat. Nr.	Glaszylinder 6 / Vpk	Ersatzteil-Set	Saugschlauch, 1 m	Dichtungsring 10 / Vpk
0.1	0.02 – 0.1	0.005	1810.2.05001	01810.001	1.1810.72001	1810.705	1810.951
0.2	0.05 – 0.2	0.01	1810.2.05002	01810.002	1.1810.72002	1810.705	1810.952
0.3	0.05 – 0.3	0.025	1810.2.05003	01810.003	1.1810.72003	1810.705	1810.953
0.5	0.1 – 0.5	0.05	1810.2.05005	01810.005	1.1810.72005	187.705	-
1.0	0.1 – 1	0.05	1810.2.0501	01810.01	1.1810.7201	187.705	-
2.0	0.3 – 2	0.1	1810.2.0502	01810.02	1.1810.7202	187.705	-

Demontage und Wartung

Die Spritze ist aus wenigen Einzelteilen gefertigt und einfach zu demontieren und montieren. Der direkte Zugang zu allen Komponenten erlaubt eine schnelle, effiziente Reinigung und Wartung. Sterilisation voll montiert in heissem Wasser oder im Autoklav bei 121°C / 250°F.



Bestellinformationen – Zubehör

Abacus™-Injektionszähler


Zur präzisen Erfassung jeder Injektion. Lässt sich ohne Werkzeug mühelos anbringen und wieder entfernen.



Beschreibung	Kat. Nr.
Zähler, 0.1 / 0.2 ml, 1 / Vpk	1.1810.962
Zähler, 0.3 – 2 ml, 1 / Vpk	1.1810.966
Magnet zur Rückstellung, 1 / Vpk	1.1810.446

FishGuide™

Optimale Positionierung der Nadel (Spritzen bis 0.5 ml) bei der Impfung von Fischen. Reduziert das Verletzungsrisiko.

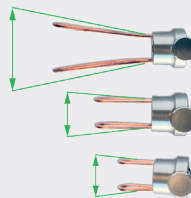

Grösse FishGuide™	Packungseinheit	Kat. Nr.
15 mm lang	1 / Vpk	1.1810.015
25 mm lang	1 / Vpk	1.1810.025
45 mm lang	1 / Vpk	1.1810.045

Injektionsnadeln

Hochwertige Luer-Lock-Nadeln aus Edelstahl. Von überragender, langlebiger Qualität, autoklavierbar.



Scannen für weitere Informationen zu Nadeln